



# Alle Vorteile für Sie vereint in einem einzigen Gefäß.



## ANWENDERSICHERHEIT

### Rote Kapsel

Unsere einzigartige rote Kapsel mit Formaldehyd, verpackt und versiegelt in einer Schutzhülle, bietet absolute **Sicherheit** für den Patienten und für das medizinische Fachpersonal.



## PROBENSICHERHEIT

### Puffergefüllter Behälter

Die **inerte** Pufferlösung im Gefäß mit dem blauen Deckel ermöglicht ein einfaches und schnelles Einbringen der Probe. Das Risiko, dass die Probe an der Pinzette haftet, wird minimiert – ganz ohne Reibung und Beschädigung.



## PROZESSICHERHEIT

### Einfach zu Aktivieren

**Sofortige** Aktivierung beim Einschrauben der roten Kapsel in den blauen Deckel

## Die SafeCapsule **Marker** Version.

- Visuelle Kontrolle der Aktivierung beim Einschrauben der roten Kapsel.
- Gleichzeitig bessere Sichtbarkeit der Probe bei Entnahme, Ausgießen und Schneiden.



## Ein Produkt – viele Anwendungsmöglichkeiten

### DERMATOLOGIE



### ZAHNMEDIZIN



### GYNÄKOLOGIE



### VETERINÄRMEDIZIN



### UROLOGIE



### PFLEGE



# SafeCapsule | SafeCapsule + Marker


## ANWENDUNG

- 01 Entfernen Sie die Alufolie und schrauben Sie den blauen Deckel ab.
- 02 Geben Sie die Probe in den Behälter und schrauben Sie den blauen Deckel wieder auf.
- 03 Schrauben Sie die rote Kapsel auf den blauen Deckel, um das konzentrierte Formalin in den Behälter zu entlassen und die Fixierung zu starten.



## SafeCapsule Prostate Biopsy Kit. Die sichere Lösung für die Bearbeitung von Prostatabiopsien.

### BESTANDTEILE

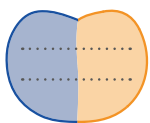

#### Prostata Layout

Um die Entnahmestellen der Proben zu dokumentieren.



**SX** markierte blaue Kasette  
**DX** markierte orange Kasette  
Für den Transport der Proben.



#### Biopsie-Pads

Zur Stabilisierung der Proben.



#### Körbe

Für das Einsetzen der Kassetten in das Gefäß.



#### Puffergefüllte Gefäße

Zur sicheren Aufnahme der Körbe mit den Proben.



**Rote Sicherheitskapsel**  
**befüllt mit Formaldehyd**  
Für die Aktivierung der Fixierung.

## SafeCapsule line



**SCO21**  
Gefäß mit blauem Schraubverschluss, befüllt mit Pufferlösung (35 Stk.) Gesamtfüllvolumen 33 ml



**SCO21**  
Gefäß mit blauem Schraubverschluss, befüllt mit Pufferlösung (35 Stk.) Gesamtfüllvolumen 33 ml



**SCO41**  
Gefäß mit blauem Schraubverschluss, befüllt mit Pufferlösung (36 Stk.) Gesamtfüllvolumen 91 ml



**SCO41**  
Gefäß mit blauem Schraubverschluss, befüllt mit Pufferlösung (36 Stk.) Gesamtfüllvolumen 91 ml



**SC100**  
SafeCapsule Prostate Biopsy Kit (1 Stck.)

**SC022**  
Rote Sicherheitskapsel, befüllt mit Formalin (35 Stk.) Gesamtfüllvolumen 7 ml

**SC022E**  
Rote Sicherheitskapsel, befüllt mit Formalin und **Marker** (35 Stk.) Gesamtfüllvolumen 7 ml

**SC042**  
Rote Sicherheitskapsel, befüllt mit Formalin (36 Stk.) Gesamtfüllvolumen 19 ml

**SC042E**  
Rote Sicherheitskapsel, befüllt mit Formalin und **Marker** (36 Stk.) Gesamtfüllvolumen 19 ml

**SC100E**  
SafeCapsule Prostate Biopsy Kit mit **Marker** (1 Stck.)



### PATENTIERT

Patentiert und entwickelt für medizinisches Fachpersonal in Zusammenarbeit mit dem Campus Bio-Medico der Universität Rom



### Meet the expert

Erfahren Sie mehr und erhalten Sie eine **virtuelle Demo** mit unseren Produktspezialisten

SCAN HERE



## Auszeichnungen DIAPATH



Co-funded by the "Horizon 2020" programme of the European Union



Donatello Series 2 wins A' Design Award and Competition 2019 in Scientific Instruments



34<sup>th</sup> Design Award 2021 World Ranking in the category "Medical Appliances"



Approved CEU's Provider by NSH - National Society for Histology

Discover the complete range: [www.diapath.com/products](http://www.diapath.com/products)

### Diapath S.p.A.

Via Pietro Savodini, 71 — 24057 Martinengo (BG) — Italy  
T +39 0363 986411 — [info@diapath.com](mailto:info@diapath.com) — [diapath.com](http://diapath.com)



### Sanova

Advancing health

Sanova Pharma GesmbH

Haidestraße 4, A-1110 Wien  
Spitzermühlestraße 6, A-4713 Gallsbach  
Tel.: +43 1 801 04 25 60  
Techn. Service: +43 1 801 04 25 87  
[medicalsistemas@sanova.at](mailto:medicalsistemas@sanova.at)  
<http://medicalsistemas.sanova.at>